



دليل تمهيدي

خدمات المشاريع التنموية ذات الصلة التي تقدمها الحالة الصحية لجمهورية تركيا للسوريين المحميين مؤقتاً



Sağlık Bakanlığı



This project is funded by the European Union.
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
هذا المشروع تم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي.

حول مشروع صحّات

بين تركيا والاتحاد الأوروبي الموقعة في 15 أكتوبر 2015 "اتفاقية إعادة القبول" في إطار الصحة التي أعدتها الوزارة "الحالة الصحية للسوريين المحميين مؤقتاً في جمهورية تركيا والمقدمة من مشروع تحسين الخدمات ذات الصلة (مشروع المشاعر)" تم منحها بقبول التمويل. تم توقيع عقد المشروع المعني مع وفد الاتحاد الأوروبي ووزارة الصحة ودخل حيز التنفيذ في 1 ديسمبر 2016. سيستمر المشروع حتى 30 نوفمبر 2019.



تقديم خدمات معملية للمراكز الصحية للمهاجرين ضمن نطاق مشروع صحة

تتمثل إحدى الأنشطة المخطط لها في إطار مشروع مصداقية المراكز الصحية للمهاجرين في تركيا ، والمراكز الصحية للمهاجرين المعززة ومراكز التثقيف الصحي للمهاجرين ، في توفير الخدمات المخبرية. ضمن نطاق هذا الدعم ، من المخطط تغطية تكاليف الاختبارات المدرجة في الصفحة التالية من ميزانية المشروع.

اختبارات الكيمياء الحيوية الروتينية

اسم الاختبار	عدد الاختبارات
الألبومين	187.500
(ALT) ألانين أمينوترانسفيراز	506.250
الفوسفاتيز القلوية	243.750
Aspartate Amino Transferase	506.250
غاما غلوتاميل ترانسفيراز	281.250
الأميليز	75.000
البيليروبين (مباشر)	187.500
(مجموع البيليروبين	187.500
(قياس التعكر) ASO	168.750
(عكر) CRP	206.250

اختبارات الكيمياء الحيوية الروتينية

اسم الاختبار	عدد الاختبارات
حديد (مصل)	412.500
قدرة تجليد الحديد	375.000
الجلوكوز	712.500
(BUN) نيتروجين اليوريا في الدم	515.625
حمض اليوريك	375.000
الكرياتينين	506.250
(CK) الكرياتين كيناز	187.500
الكالسيوم	225.000
صوديوم	183.750
الكالور	183.750

اختبارات الكيمياء الحيوية الروتينية

اسم الاختبار	عدد الاختبارات
البوتاسيوم	183.750
(LDH) اللاكتات ديهيدروجينيز	153.750
الكولسترول الكلي	581.250
HDL كوليسترول	581.250
(محسوب) LDL كوليسترول	581.250
الدهون الثلاثية	581.250
البروتين الكلي	187.500
(العكارة) - (RF) عامل الروماتويد	168.750
مجموع اختبارات الكيمياء الحيوية الروتينية	9.245.625

اختبار الهيموجلوبين الجلوكوز

اسم الاختبار	عدد الاختبارات
HbA1c (هيك)	140.625
مجموع اختبار الهيموجلوبين الجلوكوز	140.625

اختبارات الهرمونات الروتينية

اسم الاختبار	عدد الاختبارات
بيتا HCG	131.250
(E2) استراديول	18.750
فيريتين	375.000
(FSH) الهرمون المنبه للجريب	18.750
(LH) الهرمون اللوتيني	18.750
مستخد البروستات النوعي	18.750
مجاني T3	375.000
مجاني T4	375.000
TSH	468.750

اختبارات الهرمونات الروتينية

عدد الاختبارات	اسم الاختبار
525.000	فيتامين ب 12
15.000	الأنسولين
2.340.000	مجموع الفحوصات الروتينية للهرمونات

اختبارات الدم

اسم الاختبار	عدد الاختبارات
(CBC) تعداد الدم الكامل	750.000
الترسيب	75.000
للأمم / للخلف + ABO Rh	65.625
مجموع الفحوصات الدموية	890.625

Talasemi Testi

اسم الاختبار	عدد الاختبارات
تحليل متغير الهيموغلوبين	1.875
مجموع فحص الثلاسيميا	1.875

فحص بول

اسم الاختبار	عدد الاختبارات
تحليل كامل للبول	206.250
مجموع اختبار البول الكامل	206.250

ELISA (الأمصال) الاختبارات الميكروبيولوجية

عدد الاختبارات	اسم الاختبار
14.062	HAV IgG مضاد لـ
14.062	HAV IgM مضاد لـ
46.875	HCV مكافحة
46.875	وشملت مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية 24
46.875	HBs مكافحة
46.875	HBsAg
15.000	اختبار داء البروسيلات روز البنغال
4.687	اختبار تراص أنبوب البروسيل
9.375	VDRL-RPR
244.686	مجموع الاختبارات الميكروبيولوجية

الثقافة الميكروبيولوجية والفحص المجهرى

اسم الاختبار	عدد الاختبارات
ثقافة التبول	1.875
ثقافة البوسفور	1.875
ثقافة البراز	1.875
ثقافة الأذن	187
ثقافة الأنف	187
ثقافة البلغم	187
مجهر البراز	1.875
مجهر الإحليل	187
بيض الأكسجين (طريقة سيلوتيب)	187
الاختبارات الميكروبيولوجية	8.435

دم غامض في البراز

اسم الاختبار	عدد الاختبارات
دم غامض في البراز	46.875
مجموع تحاليل الدم الخفي في البراز	46.875



لكي يستفيد السوريون الخاضعون للحماية المؤقتة الذين يعيشون في بلدنا بشكل أكثر كفاءة من الخدمات الصحية ، الاتحاد كما تم طرح خدمات المختبرات على جدول الأعمال ضمن نطاق المشروع الذي نفذته وزارة الصحة T.C. و (EU) الأوروبي والمديرية العامة للصحة العامة وتم طرح مناقصة في هذا السياق. ووفقاً لنتيجة المناقصة ، سيتم توفير الخدمة المخبرية للسوريين من قبل الكونسورتيوم بقيادة شركة مختبرات (GSM) الخاضعين للحماية الذين تقدموا بطلب إلى مركز صحة المهاجرين الخاصة ، التي فازت بمناقصة "توفير نتيجة الاختبارات العملية المعتمدة" ، والتي تم إجراؤها وفقاً لقواعد المشتريات Viromed الطبي İskenderun Gözde في الاتحاد الأوروبي في نطاق مشروع الصحة. سيتم تقديم هذه الخدمة من قبل مختبر مركز وهي مقاول ، İzmir Biolab وهما شريكان في الكونسورتيوم ، ومجموعة مختبرات ، Viromed İstanbul الخاص ومختبر حتى نهاية ، ISO 15189 ، EN ، TSE الخاصة ، التي لديها شهادة اعتماد Viromed من الباطن ، تحت قيادة مختبرات الخاصة" مسؤولية نقل المواد التي يجب أخذها من المرضى المهاجرين الذين Viromed نوفمبر 2019. تقع على عاتق "مختبرات ذات الصلة GSM في 28 مقاطعة إلى المراكز لتحليلها ودراساتها وإرسال النتائج إلى GSM يتقدمون بحوالي 700

في هذا السياق؛

طلب الفحوصات المخبرية بعد فحص المريض المتقدم إلى نظام معالجة البيانات ، وتسجيل هذه الاختبارات في نظام معالجة البيانات ، وأخذ المواد اللازمة للتحاليل (الدم ، والبول ، والبراز ، وسوائل الجسم ، وما إلى ذلك) ، وترميز العينات المأخوذة في عبوات مناسبة ، وطرء عينات الدم إذا لزم الأمر تقع على عاتق الأطباء والممرضات في المركز مسؤولية إبقائهم في بيئة مناسبة حتى وقت أخذهم من قبل البريد السريع وإعداد تقرير التسليم الذي يفيد تسليم العينات إلى شركة الشحن. سيتم تسليم المواد الاستهلاكية اللازمة لهذه الإجراءات (أنابيب جمع الدم ، ونصائح الإبر ، وحامل من قبل المختبر الذي سيتم تلقي الخدمة GSM النزول ، وحاويات العينات ، وملصق الرمز الشريطي ، وحقيبة النقل ، وما إلى ذلك) إلى موظفي فيه. سيتم وضع العينات التي يتم تسليمها إلى شركة الشحن مقابل تقرير في أكياس النقل ، حيث يتم مراقبة درجة حرارتها الداخلية بواسطة مسجل بيانات (جهاز تتبع الحرارة) ، ويتم نقلها إلى المختبر حيث سيتم إجراء التحليل وسيتم تحليلها وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في المعايير. ذات الصلة عبر الإنترنت. سيتم وضع العينات التي يتم تسليمها إلى شركة الشحن مقابل تقرير في أكياس GSM سيتم إرسال نتائج التحليل إلى النقل ، حيث يتم مراقبة درجة حرارتها الداخلية بواسطة مسجل بيانات (جهاز تتبع الحرارة) ، ويتم نقلها إلى المختبر حيث سيتم إجراء التحليل ذات الصلة عبر الإنترنت GSM وسيتم تحليلها وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في المعايير. سيتم إرسال نتائج التحليل إلى

سير العمل

ستتم دراسة الفحوصات المخبرية للعينات المأخوذة من المراكز الصحية للمهاجرين الواقعة في مقاطعتي إسطنبول وصقاريا في "مختبرات فيروميد إسطنبول الخاصة" الموجودة في إسطنبول.

ستتم دراسة الاختبارات المعملية للعينات المأخوذة من مراكز صحة المهاجرين الواقعة في أنقرة وبورصة وقيصري وقونية ومرسين وعثمانية وأضنة بوردور ودنيزلي ونيفشهير وسامسون وإسبارطة وكوجالي في "مختبرات فيروميد الخاصة" في أنقرة.

ستتم دراسة الاختبارات المعملية للعينات التي سيتم أخذها من مراكز صحة المهاجرين الموجودة في مقاطعات إزمير ومانيسا وموغلا في "مختبرات بيولاب الخاصة" في إزمير.

الاختبارات المعملية للعينات المأخوذة من المراكز الصحية للمهاجرين في غازي عنتاب ، هاتاي ، كهرمان مرعش ، كيليس ، ملاطية ، ماردين ، شانلي أورفا ، شيرناك ، إيلازيغ ، ديار بكر ، باتمان وأديامان ستتم دراستها في "مختبر مركز إسكندرون جوزده الطبي الخاص" في هاتاي.



في حالة (MBYS) يتم فحص المريض المتقدم للمركز الصحي للمهاجرين بعد التسجيل في نظام الكمبيوتر المركزي طلب إجراء اختبار معمل من المريض قيد الفحص ، يتم تسجيل رقم الباركود الذي سيتم استخدامه لذلك المريض في تتم عملية أخذ العينات على النحو التالي ويتم الاحتفاظ بها في البيئة المحددة للنقل. يتم إعداد مذكرة تسليم MBYS. للعينات التي سيتم تسليمها إلى شركة الشحن. عند تسليمها إلى شركة الشحن ، تتم مطابقة العينات مع إشعار وشركة المقاول ، GSM التسليم. سيتم تحديد أوقات تسليم العينات التي سيتم نقلها إلى شركة الشحن من قبل موظف مرة واحدة في اليوم. توضع العينات المأخوذة من قبل شركة النقل في أكياس نقل خاصة بها بطاريات ثلجية وأجهزة LBYS ذات الصلة عبر GSM تسجيل البيانات. يتم تحليل العينات المنقولة إلى المختبر ذي الصلة وإرسال النتائج إلى (نظام إدارة معلومات المختبر).

ترميز العينات ؛

وستقوم "مختبرات فيروميد الخاصة" بإعداد ملصقات بوركود ، وهي شركة المقاولات الرئيسية ، وسيتم تسليمها إلى ضد الاختلاس GSM الأطباء المسؤولين عن نظام

ملصق الباركود الذي سيتم إلصاقه على الحاويات حيث يتم وضع مادة المريض في طريقة لتغطية 9 (تسعة) مجموعات اختبار منفصلة. رقم الباركود في مجموعة الملصقات هذه يخص مريض واحد فقط. في أي مجموعة اختبار يكون الاختبار أو الاختبارات التي طلبها الطبيب ، يتم إرفاق الملصق الذي يحمل اسم تلك المجموعة بحاوية العينة (الأنبوب ، وحاويات العينات الأخرى). يتم إتلاف الملصقات الأخرى غير المستخدمة التي تحمل نفس رقم الرمز الشريطي.



أخذ العينات والتحضير للنقل

تحضير عينات للاختبارات الهرمونية والكيميائية الحيوية والمصلية ؛

يتم أخذ عينة الدم في أنبوب جل ذو غطاء أصفر. بعد أخذ الدم ، يتم قلبه برفق 3-4 مرات لمزج منشط الجلطة والدم. بعد 20 دقيقة على سطح مستو ، يتم الطرد المركزي عند 3000 دورة في الدقيقة لمدة 5 دقائق. يتم حفظ الأنابيب الطاردة المركزية في الثلاجة (2-8 درجة مئوية) حتى وقت النقل.

وتحليل متغير الهيموغلوبين ؛ **A1c** تحضير عينات لتعداد الدم الكامل ، تصنيف فصائل الدم ، الهيموغلوبين

يتم قلب الأنابيب بلطف حوالي 6-8 مرات لمنع تجلط الدم. تحفظ في درجة حرارة الغرفة (18-22 درجة مئوية) أو في الثلاجة (2-8 درجة EDTA. يتم أخذ عينة الدم في أنبوب مئوية) حتى وقت النقل.

لأختبار الترسيب.

يتم أخذ عينة الدم في أنبوب ترسيب السترات الأسود المغطى. يتم قلب الأنابيب بلطف حوالي 6-8 مرات لمنع تجلط الدم. تحفظ في درجة حرارة الغرفة (18-22 درجة مئوية) أو في الثلاجة (2-8 درجة مئوية) حتى وقت النقل.

أخذ العينات والتحضير للنقل

أخذ عينة لاختبارات الثقافة الميكروبيولوجية

ثقافة البوسفور يتم لمس قطعة قطن معقمة بلطف على أسطح اللوزتين والبلعوم الأنفي والمناطق المتهبة. يجب الحرص على تجنب ملامسة سطح اللسان والجدران الجانبية لتجويف الفم. يتم وضع المسحة بحيث يتم غمس المسحة القطنية في الجزء المبلل من وسيط النقل ذي الرمز الشريطي. تحفظ في درجة حرارة الغرفة (18-22 درجة مئوية) أو في الثلاجة (2-8 درجة مئوية) حتى وقت النقل.

زراعة مسحة الأنف يتم تدوير قطعة قطن معقمة بلطف على جانبي الحاجز الأنفي والسطح الداخلي للأنف. يتم بعد ذلك وضع المسحة بطريقة يتم فيها غمس المسحة القطنية في الجزء المبلل من وسيط نقل الباركود. تحفظ في درجة حرارة الغرفة (18-22 درجة مئوية) أو في الثلاجة (2-8 درجة مئوية) حتى وقت النقل.

ثقافة الأذن يتم تنظيف قناة الأذن الخارجية بقطعة قطن مبللة بمطهر. يتم تدوير قطعة قطن معقمة بلطف وتدويرها لتلمس السطح الداخلي لقناة الأذن الخارجية. يتم بعد ذلك وضع المسحة بطريقة يتم فيها غمس المسحة القطنية في الجزء المبلل من وسيط نقل الباركود. تحفظ في درجة حرارة الغرفة (18-22 درجة مئوية) أو في الثلاجة (2-8 درجة مئوية) حتى وقت النقل.

ثقافة البلغم يفضل استخراج البلغم في ساعات الصباح. يتم شطف الفم بالماء ، ويتم إزالة البلغم بعد تمرين التنفس العميق في الحاوية المشفرة ذات الغطاء اللولبي الممنوحة للمريض. تحفظ في درجة حرارة الغرفة (18-22 درجة مئوية) أو في الثلاجة (2-8 درجة مئوية) حتى وقت النقل.



أخذ العينات والتحضير للنقل

ثقافة التبول؛ يغسل المريض يديه بالماء والصابون ويشطف. بعد ذلك ، يتم غسل المنطقة التناسلية بالماء والصابون ، وشطفها بكمية كبيرة من الماء وتجفيفها بشاش أو قطن مبلل بمطهر. بعد سكب الجزء الأمامي من البول ، يتم وضع البول في منتصف التيار في حاوية بول معقمة مشفرة ومتوافقة مع أنبوب البول المفرغ. يتم أخذ بعض البول الموجود في تحفظ في درجة حرارة الغرفة. GSM الحاوية المعقمة في أنبوب البول المعقم للنقل ، والذي يحتوي على محتوى يحافظ على استقرار الكائنات الحية الدقيقة ، بواسطة مسؤول (22-18 درجة مئوية) أو في الثلاجة (2-8 درجة مئوية) حتى وقت النقل. يجب فتح غطاء وعاء البول المعقم قبل إدخال البول مباشرة. يجب أن تؤخذ الظروف المعقمة في الاعتبار أثناء تنفيذ كل هذه الإجراءات. يجب على المرضى الذين هم في فترة الحيض إبلاغ المصاحبة بذلك.

بعد تنظيف المنطقة التناسلية عند الأطفال ، يتم إرفاق كيس بول مزود حسب الجنس. يتم وضع كيس البول في حاوية بول معقمة مشفرة.

إذا تم أخذ عينة بول من القسطرة ، يتم مسح المنطقة القريبة من مجرى البول بشاش أو قطن منقوع في 70٪ كحول إيثيلي. مع توجيه طرف الإبرة لأعلى ، يتم إدخال حقنة معقمة في القسطرة ويتم جمع 5-10 مل من البول. يتم نقل البول الموجود في المحقنة إلى وعاء بول معقم مشفر تحت ظروف معقمة. لا يؤخذ بول من الكيس. يفضل بول الصباح.

الجزء القطني من المسحة القطنية المعقمة في عبوة كل وسيلة نقل GSM ثقافة البراز؛ يتم أخذ عينة البراز في حاوية براز بغطاء نظيف ومحكم الغلق. يلامس الموظفون المسؤولون عن (حمل بلير ، وما إلى ذلك) إلى أجزاء مختلفة من البراز. بعد ذلك ، يتم وضع المسحة في أنبوب الباركود بحيث يتم غمر الجزء القطني في الجزء المبلل. تحفظ في درجة حرارة الغرفة (22-18 درجة مئوية) أو في الثلاجة (2-8 درجة مئوية) حتى وقت النقل.

أخذ العينات والتحضير للنقل

الفحص المجهرى للبراز ، اختبار الدم الخفي في البراز ؛ بعد أخذ عينة البراز في حاوية براز نظيفة ومختومة ، يتم أخذها في أنبوب الباركود مع محلول مخفف بمساعدة عصا. تحفظ في درجة حرارة الغرفة (18-22 درجة مئوية) أو في الثلاجة (2-8 درجة مئوية) حتى وقت النقل GSM بواسطة

الفحص المجهرى الإحليلي يتم استخدام وسط النقل ومسحات القطن. في النساء ، يتم أخذ إفرازات مجرى البول بقطعة قطن من قبل الطبيب ، إن وجدت. يتم غمر الجزء القطني من المسحة في وسيط نقل الباركود (في الأنبوب). إذا كان هناك إفرازات مجرى البول لدى المريض الذكر ، يتم أخذ الجزء القطني من المسحة المعقمة وأخذ عينة التفريغ ، ويتم غمر الجزء القطني من المسحة في الوسط ، ويتم وضعه في وسيط نقل الباركود (في الأنبوب). تحفظ في درجة حرارة الغرفة (18-22 درجة مئوية) أو في الثلاجة (2-8 درجة مئوية) حتى وقت النقل.

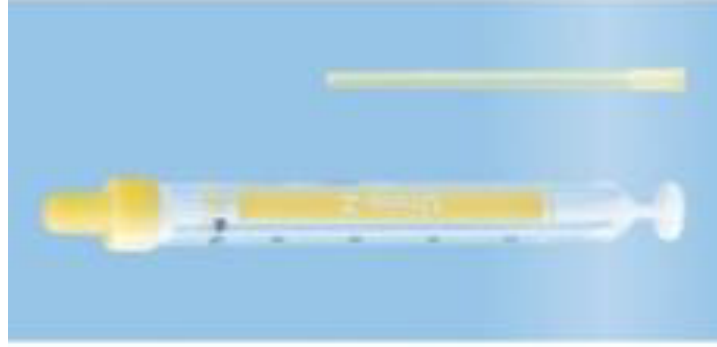
أوكسيور (إنتيروبيوس فيرمولاريس) بيضة ؛ يتم إعطاء المرضى الذين قدموا تاريخاً لمرض إنتيروبيوسيس في سوابقهم شريحتين ويطلب منهم تنفيذ الإجراء التالي. ويفضل ، قبل التبرز في الصباح ، أن يتم توصيل شريط سيلوفان شفاف بطول الشريحة بفتحة شرج المريض. بعد حوالي دقيقة واحدة ، تتم إزالة بعد وضع الملصقات المناسبة ، يتم الاحتفاظ GSM الشريط من المنطقة التي تم توصيله بها ولصقه بشكل صحيح على الشريحة. يتم تسليم الشرائح إلى موظف بها في درجة حرارة الغرفة (18-22 درجة مئوية) لتسليمها إلى شركة الشحن.



Test Gruplarına Göre Kullanılacak Kap Tüpleri

مجموعة الاختبار	الحاوية المراد استخدامها			تفسير
	لون الغلاف	محتويات	كمية العينة	
الاختبارات البيوكيميائية	 الأصفر	أنابيب تحتوي على هلام فاصل	5 - 6 mL	بعد سحب الدم ، يتم قلبه برفق 3-4 مرات لمزج منشط الجلطة والدم. لا ينبغي أبدا أن تهتز. بعد 20 دقيقة من أخذ الدم ، يجب طرده عند 3000 دورة في الدقيقة لمدة 5 دقائق.
اختبارات الهرمونات	 الأصفر	أنابيب تحتوي على هلام فاصل	5 - 6 mL	بعد سحب الدم ، يتم قلبه برفق 3-4 مرات لمزج منشط الجلطة والدم. لا ينبغي أبدا أن تهتز. بعد 20 دقيقة من أخذ الدم ، يجب طرده عند 3000 دورة في الدقيقة لمدة 5 دقائق.
الاختبارات المصلية	 الأصفر	أنابيب تحتوي على هلام فاصل	5 - 6 mL	بعد سحب الدم ، يتم قلبه برفق 3-4 مرات لمزج منشط الجلطة والدم. لا ينبغي أبدا أن تهتز. بعد 20 دقيقة من أخذ الدم ، يجب طرده عند 3000 دورة في الدقيقة لمدة 5 دقائق.
فحص دم شامل	 أرجواني	K2 EDTA أنابيب تحتوي على	3 mL	بعد أخذ الدم ، يجب قلبه برفق 6-8 مرات.
تحليل متغير الهيموغلوبين	 أرجواني	K2 EDTA أنابيب تحتوي على	4 mL	بعد أخذ الدم ، يجب قلبه برفق 6-8 مرات.

Test Gruplarına Göre Kullanılacak Kap Tüpleri

مجموعة الاختبار	الحاوية المراد استخدامها			تفسير
	لون الغلاف	محتويات	كمية العينة	
A1C الهيموجلوبين	 أرجواني	أنابيب تحتوي على هلام فاصل	5 - 6 mL	بعد سحب الدم ، يتم قلبه برفق 3-4 مرات لمزج منشط الجلطة والدم. لا ينبغي أبدا أن تهتز. بعد 20 دقيقة من أخذ الدم ، يجب طرده عند 3000 دورة في الدقيقة لمدة 5 دقائق.
اختبار الترسيب	 أسود	أنابيب تحتوي على هلام فاصل	5 - 6 mL	بعد سحب الدم ، يتم قلبه برفق 3-4 مرات لمزج منشط الجلطة والدم. لا ينبغي أبدا أن تهتز. بعد 20 دقيقة من أخذ الدم ، يجب طرده عند 3000 دورة في الدقيقة لمدة 5 دقائق.
فحص البول الكامل	 			
دم غامض في البراز				

Test Gruplarına Göre Kullanılacak Kap Tüpleri

مجموعة الاختبار	الحاوية المراد استخدامها			تفسير
	لون الغلاف	محتويات	كمية العينة	
ثقافة التبول				
ثقافة البراز				
ثقافات اخرى				

معلومات للتواصل

مختبر اسطنبول الخاص

الهاتف: Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. BlackOut İş Mrk. No: 211 / Blok Kat: 6 / A1 34381 işli / Istanbul-Turkey
info@viromedistanbul.co: 92 10 0212231 مركز الاتصال 87 87 0532138 الفاكس: 93 10 0212231 البريد الإلكتروني

مختبرات خاصة متطورة

الهاتف: Atatürk Bulvarı No: 237 / 26-27-28 (Kuğulupark بجوار) Kavaklıdere Çankaya / ANKARA: 85 85 0312427 الفاكس:
info@viromed.com.tr: 80 85 0312427 البريد الإلكتروني

مجموعة مختبرات بيولاب

الهاتف: Mimar Sinan Mahallesi, 1399. Sk. 8/1-B, 35220 Konak / İzmir 0232463: 90 91 232464 91/0 91 0232464 الفاكس:
info@biolablttd.com.tr: 45 95: 45 95 البريد الإلكتروني

ISKENDERUN GÖZDE MEDICAL CENTER مختبر خاص في

العنوان: Nesli Mahallesi Varyant Caddesi 157. Sokak No: 12 Nardüzü / İskenderun